



BINDER官方微信公众号

环境模拟箱



MK | MKF | MKT | MKFT 系列



环境模拟箱

MK 系列	页面 6
MKF 系列	页面 11
MKT 系列	页面 16
MKFT 系列	页面 20

BINDER 环境模拟箱完美适用于在动态条件下进行的材料检测。5 K/min 左右的默认高交变速度使符合标准的检测成为可能。MK 或 MKT 环境模拟箱适用于从 -40 °C 或 -70 °C ~ 180 °C 范围内的复杂温度情况。MKF 和 MKFT 系列高低温交变试验箱不仅可以在此温度范围内进行材料检测，还可以在 RH 10% ~ 98 % 相对湿度的范围内对湿度进行调节。

产品选择 | 环境模拟箱

	MK › 页面 6	MKF › 页面 11	MKT › 页面 16	MKFT › 页面 20
型号				
56	•	•	–	–
115	•	•	•	•
240	•	•	•	•
400	•	•	–	–
720	•	•	•	•
1020	•	•	–	–
一般数据				
温度范围 [°C]	- 40...180	- 40...180	- 70...180	- 70...180
湿度范围 [%相对湿度]	–	10...98	–	10...98
以太网接口	•	•	•	•
USB 接口	•	•	•	•
强制对流	•	•	•	•
控制器和定时功能				
控制器显示屏			TFT 触摸屏	
斜坡函数功能	•	•	•	•
延时开	•	•	•	•
编程功能	•	•	•	•
温度安全装置 1 级	•	•	•	•
独立可调的温度安全装置 2 级	•	•	•	•
声学温度报警	•	•	•	•
可视温度报警	•	•	•	•

• 标准配置

我们的优势



均匀的温度分布

MK, MKF, MKT, MKFT 系列

通过 BINDER APT.line™ 内腔预热技术，即使箱内处于满载情况，也能实现长期稳定运行。



灵活的供水方式

MKF, MKFT 系列

灵活的供水方式，操作简便。



便捷舒适的操作环境

MK, MKF, MKT, MKFT 系列

在标准配置中配备带有 LED 照明的可加热式观察窗，便于对样品的观察。



编程和数据采集

MK, MKF, MKT, MKFT 系列

可通过带彩色显示屏的程序控制器和通过计算机进行远程控制的 APT-COM™ 软件进行数据采集和编程。

MK 系列 | 适用于温度快速变化

BINDER MK 系列箱体适用于 - 40 °C ~ 180 °C 之间的冷热测试。对循环温度测试而言，MK 是替代昂贵的个性化解决方案的睿智之选。



优势

- APT.line™ 预热腔可实现均匀的气候条件
- 综合编程和数据采集
- 大型可加热式观察窗

性能特点

- 温度范围：- 40 °C ~ 180 °C
- APT.line™ 预热腔技术
- 采用时段编程和实时编程的直观触摸屏控制器
- 通过USB可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
- BINDER 多功能管理软件 APT-COM™ Basic (基础) 版本
- 对样品的可编程冷凝保护
- 采用光学和声音报警的故障诊断系统
- 采用无氟制冷剂 R-452A
- 由不锈钢制成的 1 块搁架
- 带硅胶塞的检测孔 (型号 56、115、240、400) 50 mm，左侧

尺寸

型号	内部容积 [L]
MK 56	60
MK 115	115
MK 240	228
MK 400	417
MK 720	734
MK 1020	991

选配件和配件摘录

带硅胶塞的检测孔	用于放入外部测量装置。选择多样，可选择不同的直径和位置(左侧、右侧或上部)。	
BINDER PURE AQUA 服务	用于水净化或进行脱盐处理，由外壳、测量装置及所有必要连接件组成。	
Dry-air purge	适用于模拟干燥的低温气候。针对可调湿度的 MKF 和 MKFT 系列，扩展了其温湿度范围，并可模拟通用汽车标准，例如 PV 2005；PV 1200；PR 308.2。	
服务	在保养服务协议范畴内，可以享受安装、维护、校准、验证或质保服务，或者可以针对各个单项享受相应服务。更多信息请查阅配件和服务章节。	
BINDER INDIVIDUAL	基于 BINDER 系列产品，我们可研发和实现个性化解决方案，作为单独设备生产或进行小批量供货。所有产品均经过检测和认证，供货时可保证完整的功能和质保。更多信息请查阅配件和服务章节。	

技术参数

型号	MK 56	MK 115	MK 240	MK 400	MK 720	MK 1020
尺寸						
内部容积 [L]	60	115	228	417	734	991
设备净重 (空载) [kg]	165	260	340	413	570	621
最大总负载 [kg]	60	60	70	150	160	200
每块搁板的最大负载 [kg]	15	30	30	30	40	40
壁距 后部 [mm]	300	300	300	500	300	300
壁距 侧面 [mm]	200	200	200	300	200	200
尺寸 - 内部尺寸						
宽度 [mm]	400	600	735	735	1200	1200
高度 [mm]	420	480	700	700	1020	1020
深度 [mm]	350	400	443	810	600	810
尺寸 - 外部尺寸						
宽度 [mm]	720	980	1115	1115	1580	1580
高度 [mm]	1445	1725	1710	1710	2005	2005
深度 [mm]	778	865	925	1400	1140	1480
温度性能数据						
温度范围 [°C]	- 40...180	- 40...180	- 40...180	- 40...180	- 40...180	- 40...180
温度偏差 取决于设定值 [± K]	0.5...1.5	0.1...2	0.1...1.2	0.1...1.2	0.3...2	0.1...1.8
温度波动度 取决于设定值 [± K]	0.1...0.5	0.1...0.5	0.1...0.5	0.1...0.5	0.1...0.5	0.1...0.5
加热时间 从 - 40°C ~ 180°C [min]	–	–	–	55	–	60
平均加热速度 依据 IEC 60068-3-5 [K/min]	5	5.3	5	5	4	5.5
平均冷却速度 依据 IEC 60068-3-5 [K/min]	5	5	4.5	5	4.5	5
电气数据						
额定功率 (400 V) [kW]	–	–	–	7	–	11.5
额定功率 (230 V) [kW]	2.8	–	–	–	–	–
额定功率 (400 V) [kW]	–	3.5	5.6	–	8.7	–
与环境相关的数据						
能耗 [②20°C]	600 Wh/h	650 Wh/h	1300 Wh/h	1400 Wh/h	1900 Wh/h	1500 Wh/h
固件						
搁板数量 (标准/最多)	1/4	1/4	1/6	1/6	1/11	1/11

所有技术数据均是在室温22°C±3°C、电源电压波动度±10%、配备标准装置的空载设备内测得。温度数据根据DIN 12880，参考BINDER工厂标准进行测试获得。测量遵循了内腔高度、宽度和深度处各留10%间隔的建议，并在测试期间保持100%的风扇转速。所有数据指标均为平均值，作为批量生产机器的典型数据。我们保留随时更改技术规格的权利。

订购信息 [订货编号]


额定电压	选购型号	MK 56	MK 115	MK 240	MK 400	MK 720	MK 1020
400 V 3 ~ 50 Hz	标准	–	9020-0375	9020-0376	9020-0406	9020-0377	9020-0407
230 V 1 ~ 50 Hz	标准	9020-0374	–	–	–	–	–

所达标准摘要


- MIL STD 810:2000-01
- DIN EN 60068-2-14

热补偿


MK 56

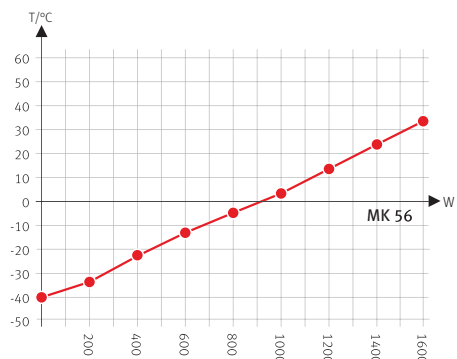

MK 115

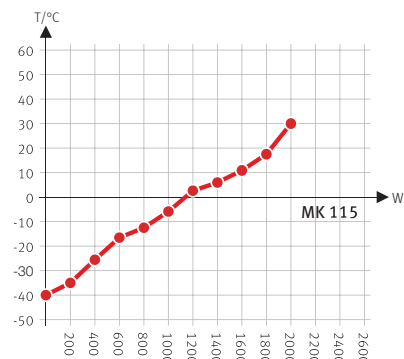


MK 240

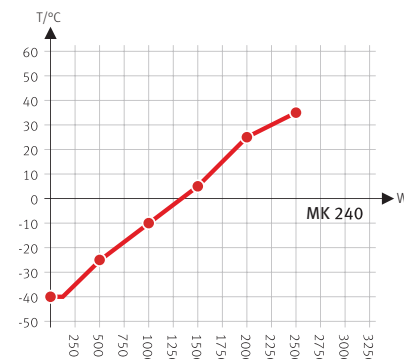


Heat compensation with a set value of -40°C


MK 400

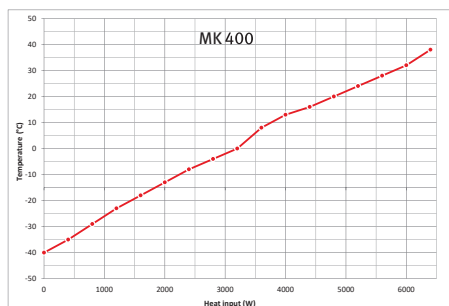

MK 720

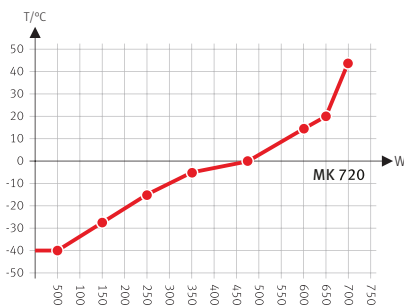


MK 1020

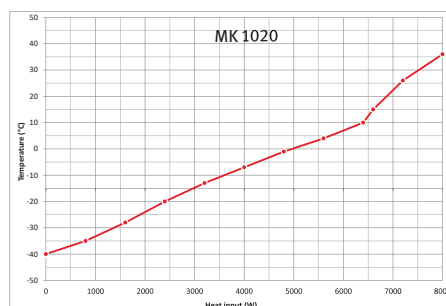


Heat compensation with a set value of -40°C

包括加装件和连接件的尺寸 [mm]


MK 56

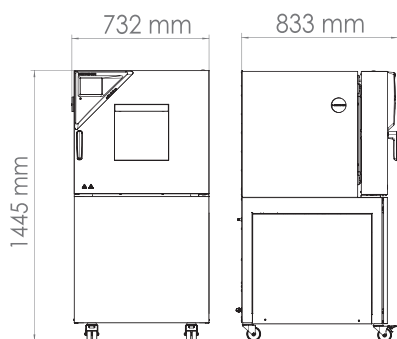


MK 115

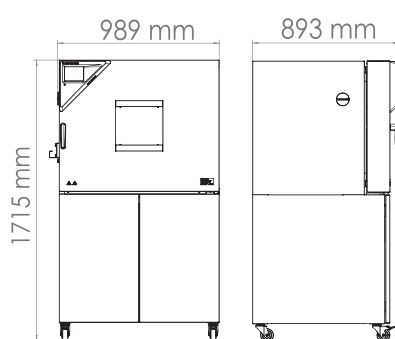

MK 240

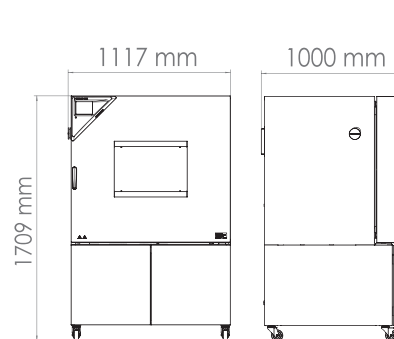

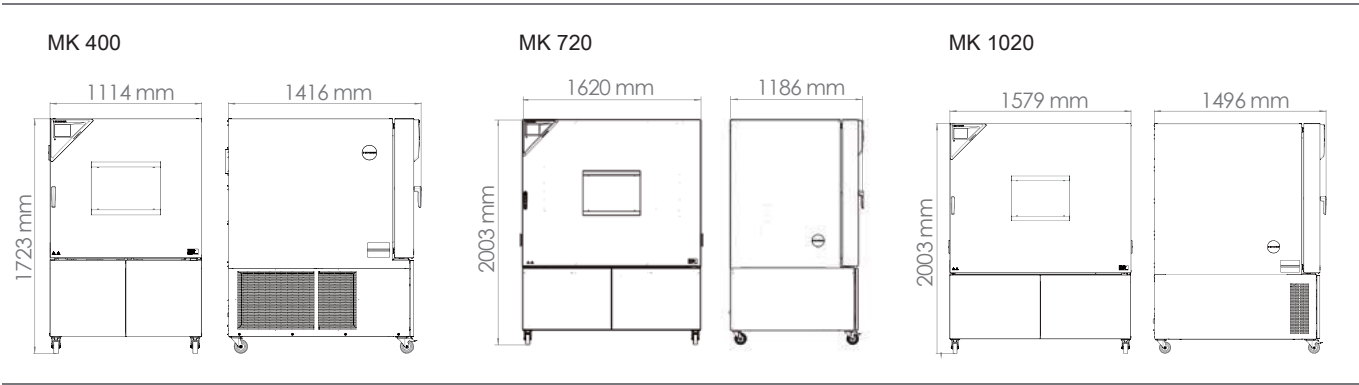

MKF 系列 | 适用于高低温湿热交变

BINDER MKF 系列环境模拟箱适用于依据基于 DIN 标准及 IEC 标准的温度及环境测试方法而进行的冷热测试，标配多种功能的设备更便于操作。



优势

- APT.line™ 预热腔可实现均匀的气候条件
- 自动进水及废水管理
- 快速响应的压力加温
- 综合编程和数据采集
- 大型可加热式观察窗

性能特点

- 温度范围：- 40 °C ~ 180 °C
- 湿度范围：RH 10 % ~ RH 98 %
- 采用电容式湿度传感器和蒸汽加湿进行湿度调节
- APT.line™ 内腔预热技术
- 采用时段编程和实时编程的直观触摸屏控制器
- 采用无氟制冷剂 R-452A
- 集成式储水箱 20 L
- 1 块不锈钢搁架
- 带硅胶塞的检测孔 (型号 56、115、240、400) 50 mm，左侧
- 带硅胶塞的检测孔 (型号 720、1020) 80 mm 2个，左侧和右侧

尺寸

型号	内部容积 [L]
MKF 56	60
MKF 115	115
MKF 240	228
MKF 400	417
MKF 720	734
MKF 1020	991

选购件和配件摘录

带硅胶塞的检测孔

用于放入外部测量装置。选择多样，可选择不同的直径和位置(左侧、右侧或上部)。



**BINDER PURE
AQUA 服务**

用于水净化或进行脱盐处理，由外壳、测量装置及所有必要连接件组成。



Dry-air purge

适用于模拟干燥的低温气候。针对可调湿度的 MKF 和 MKFT 系列，扩展了其温湿度范围，并可模拟通用汽车标准，例如 PV 2005；PV 1200；PR 308.2。



服务

在保养服务协议范畴内，可以享受安装、维护、校准、验证或质保服务，或者可以针对各个单项享受相应服务。更多信息请查阅配件和服务章节。



BINDER INDIVIDUAL

基于 BINDER 系列产品，我们可研发和实现个性化解决方案，作为单独设备生产或进行小批量供货。所有产品均经过检测和认证，供货时可保证完整的功能和质保。更多信息请查阅配件和服务章节。



技术参数

型号	MKF 56	MKF 115	MKF 240	MKF 400	MKF 720	MKF 1020
尺寸						
内部容积 [L]	60	115	228	417	734	991
设备净重 (空载) [kg]	175	280	360	432	590	636
最大总负载 [kg]	60	60	70	150	160	200
每块搁板的最大负载 [kg]	15	30	30	30	40	40
壁距 后部 [mm]	300	300	300	500	300	300
壁距 侧面 [mm]	200	200	200	300	200	200
尺寸 - 内部尺寸						
宽度 [mm]	400	600	735	735	1200	1200
高度 [mm]	420	480	700	700	1020	1020
深度 [mm]	348	400	443	810	600	810
尺寸 - 外部尺寸						
宽度 [mm]	720	980	1115	1115	1580	1580
高度 [mm]	1445	1725	1715	1710	2005	2005
深度 [mm]	780	865	925	1400	1140	1480
温度性能数据						
温度范围 [°C]	- 40...180	- 40...180	- 40...180	- 40...180	- 40...180	- 40...180
温度偏差 取决于设定值 [± K]	0.5...1.5	0.1...1.3	0.1...1.5	0.1...1.2	0.1...1.8	0.1...1.8
温度波动度 取决于设定值 [± K]	0.1...0.5	0.1...0.6	0.1...0.5	0.1...0.5	0.1...0.5	0.1...0.5
加热时间 从 - 40°C ~ 180°C [min]	–	–	–	55	–	60
平均加热速度 依据 IEC 60068-3-5 [K/min]	5	5.5	5	5	4.8	5.5
平均冷却速度 依据 IEC 60068-3-5 [K/min]	5	4.5	5	5	4.8	5
气候性能数据						
温度范围 [°C]	10...95	10...95	10...95	10...95	10...95	10...95
温度偏差 [± K]	–	–	–	0.1...1.5	–	0.1...2
温度波动度 [± K]	–	–	–	0.1...1.3	–	0.1...1.5
温度波动度 取决于设定值 [± K]	0.1...0.5	0.1...1.3	0.1...1.3	–	0.2...1.5	–
湿度范围	10...98	10...98	10...98	10...98	10...98	10...98
湿度波动度 取决于设定值 [± 相对湿度]	≤2.5	≤2.5	≤2.5	2.5	≤2.5	2.5
电气数据						
额定功率 (230 V) [kW]	2.8	–	–	–	–	–
额定功率 (400 V) [kW]	–	4.8	6.8	8	11	12.5
与环境相关的数据						
能耗 [@ 25°C , RH 60%]	–	–	–	1900W	–	2200W
固件						
搁板数量 (标准/最多)	1/4	1/4	1/6	1/6	1/11	1/11

所有技术数据均是在室温22°C±3°C、电源电压波动度±10%、配备标准装置的空载设备内测得。温度数据根据DIN 12880，参考BINDER工厂标准进行测试获得。测量遵循了内腔高度、宽度和深度处各留10%间隔的建议，并在测试期间保持100%的风扇转速。所有数据指标均为平均值，作为批量生产机器的典型数据。我们保留随时更改技术规格的权利。

订购信息 [订货编号]


额定电压	选购型号	MKF 56	MKF 115	MKF 240	MKF 400	MKF 720	MKF 1020
400 V 3 ~ 50 Hz	标准	–	9020-0379	9020-0380	9020-0408	9020-0381	9020-0409
200...230 V 1 ~ 50 Hz	标准	9020-0378	–	–	–	–	–

所达标准摘要

- DIN EN 60068-2-30:2006-06
- DIN EN 60068-2-38:2010-06
- MIL STD 810:2000-01
- DIN EN 60068-2-66


温湿度图表

MKF 56, MKF 115, MKF 240, MKF 720

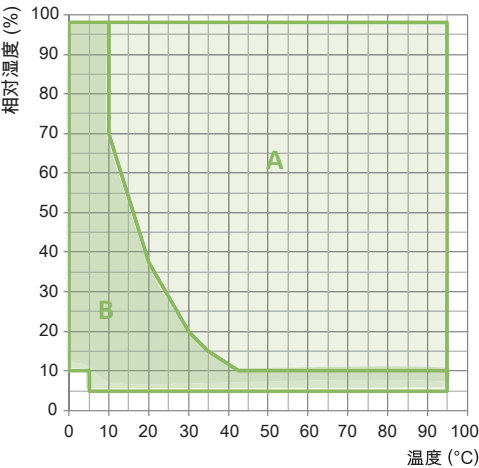

A : 标准气候区域
B : 使用Dry-air purge 后的扩展区域


MKF 56, MKF 115, MKF 240, MKF 400, MKF 720, MKF 1020

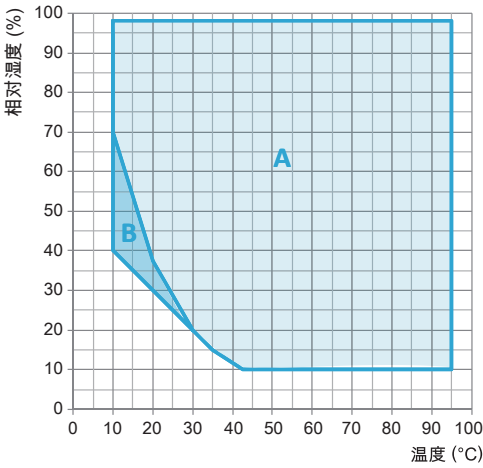


A : 标准气候区域
B : 受到时间限制的运行区域 (最长24小时)

热补偿


MKF 56

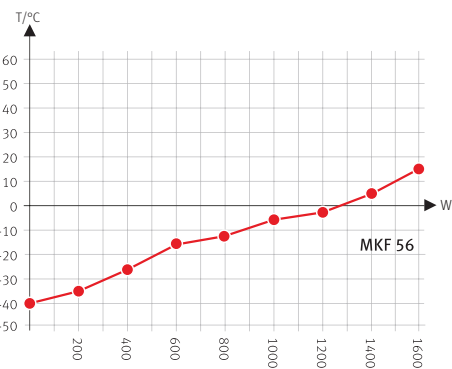

MKF 115

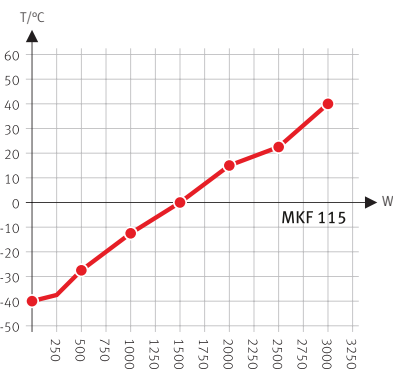


MKF 240

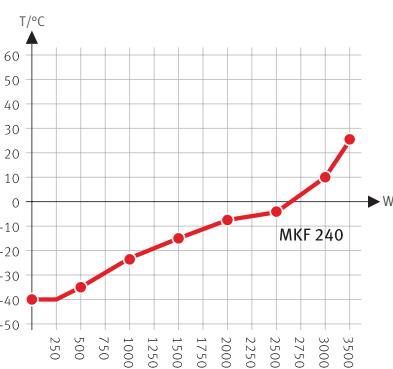


Heat compensation with a set value of -40°C


MKF 400

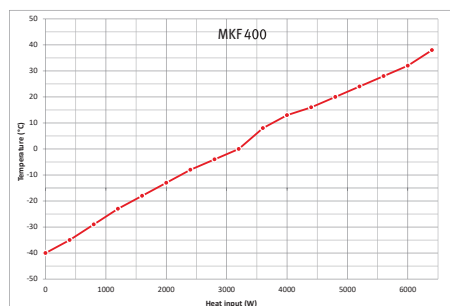

MKF 720

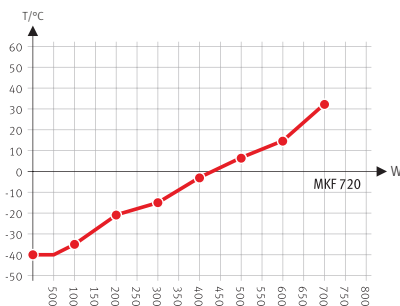


MKF 1020

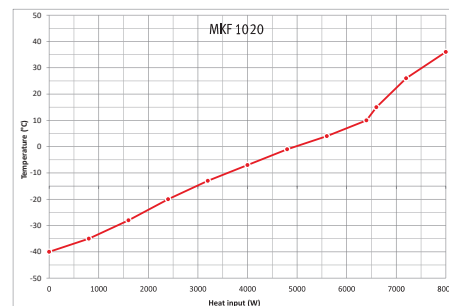


Heat compensation with a set value of -40°C

包括加装件和连接件的尺寸 [mm]


MKF 56

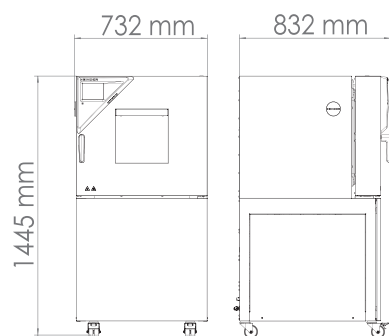


MKF 115

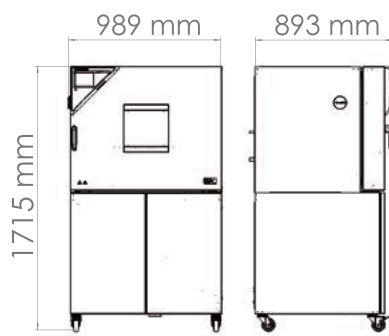


MKF 240

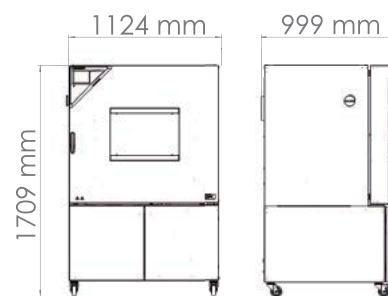


MKF 400

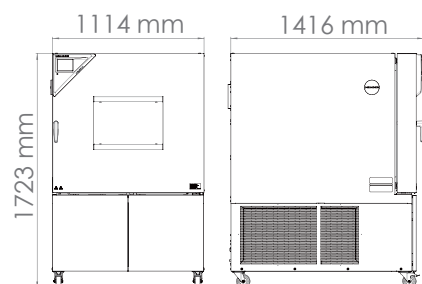

MKF 720

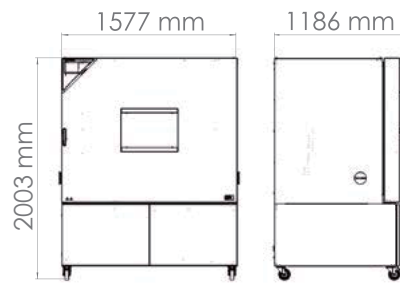

MKF 1020

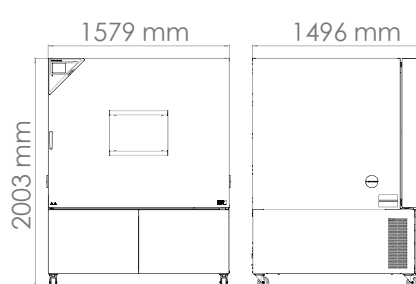

MKT 系列 | 适用于超低温至高温环境下的温度快速变化

温度范围介于 - 70 °C ~ 180 °C 之间，具备自然模拟的特定优势，造就了 BINDER MKT 系列独一无二的性能。该款环境模拟箱可在循环温度测试中满足高精度和高性能要求。



优势

- APT.line™ 预热腔可实现均匀的气候条件
- 综合编程和数据采集
- 大型可加热式观察窗

性能特点

- 温度范围：- 70 °C ~ 180 °C
- 4 个零电压开关触点
- APT.line™ 预热腔技术
- 对样品的可编程冷凝保护
- 带 LED 内部照明的可加热式观察窗
- BINDER 多功能管理软件 APT-COM™ Basic (基础) 版本
- 采用光学和声音报警的故障诊断系统
- 采用时段编程和实时编程的直观触摸屏控制器
- 通过USB可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
- 带硅胶塞的检测孔 (型号 115、240 : 50 mm , 左侧)

尺寸

型号	内部容积 [L]
MKT 115	115
MKT 240	228
MKT 720	734

选配件和配件摘录

带硅胶塞的检测孔

用于放入外部测量装置。选择多样，可选择不同的直径和位置(左侧、右侧或上部)。



BINDER PURE AQUA 服务

用于水净化或进行脱盐处理，由外壳、测量装置及所有必要连接件组成。



Dry-air purge

适用于模拟干燥的低温气候。针对可调湿度的 MKF 和 MKFT 系列，扩展了其温湿度范围，并可模拟通用汽车标准，例如 PV 2005；PV 1200；PR 308.2。



服务

在保养服务协议范畴内，可以享受安装、维护、校准、验证或质保服务，或者可以针对各个单项享受相应服务。更多信息请查阅配件和服务章节。



BINDER INDIVIDUAL

基于 BINDER 系列产品，我们可研发和实现个性化解决方案，作为单独设备生产或进行小批量供货。所有产品均经过检测和认证，供货时可保证完整的功能和质保。更多信息请查阅配件和服务章节。



技术参数

型号	MKT 115	MKT 240	MKT 720
尺寸			
内部容积 [L]	115	228	734
设备净重 (空载) [L]	305	380	610
最大总负载 [kg]	60	70	160
每块搁板的最大负载 [kg]	30	30	40
壁距 后部 [mm]	300	300	300
壁距 侧面 [mm]	200	200	200
尺寸 - 内部尺寸			
宽度 [mm]	600	735	1200
高度 [mm]	480	700	1020
深度 [mm]	400	443	600
尺寸 - 外部尺寸			
宽度 [mm]	980	1115	1580
高度 [mm]	1725	1935	2005
深度 [mm]	865	925	1140
温度性能数据			
温度范围 [°C]	-70...180	-70...180	-70...180
温度偏差 取决于设定值 [± K]	0.2...1.8	0.1...1.0	0.3...2
温度波动度 取决于设定值 [± K]	0.1...0.6	0.1...0.4	0.1...0.5
平均加热速度 依据 IEC 60068-3-5 [K/min]	5.3	5	4.5
平均冷却速度 依据 IEC 60068-3-5 [K/min]	4.2	4.2	4
电气数据			
额定功率 (400 V) [kW]	5.5	6.5	13
固件			
搁板数量 (标准/最多)	1/4	1/6	1/11

所有技术数据均是在室温22°C±3°C、电源电压波动度±10%、配备标准装置的空载设备内测得。温度数据根据DIN 12880，参考BINDER工厂标准进行测试获得。测量遵循了内腔高度、宽度和深度处各留10%间隔的建议，并在测试期间保持100%的风扇转速。所有数据指标均为平均值，作为批量生产机器的典型数据。我们保留随时更改技术规格的权利。

订购信息 [订货编号]


额定电压	选购型号	MKT 115	MKT 240	MKT 720
400 V 3~ 50 Hz	标准	9020-0385	9020-0386	9020-0387

所达标准摘要


- DIN EN 60068-2-1:2008-01
- DIN EN 60068-3-5:2002-12
- MIL STD 810:2000-01

热补偿


MKT 115

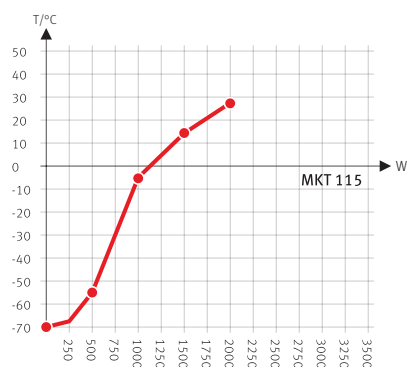

MKT 240

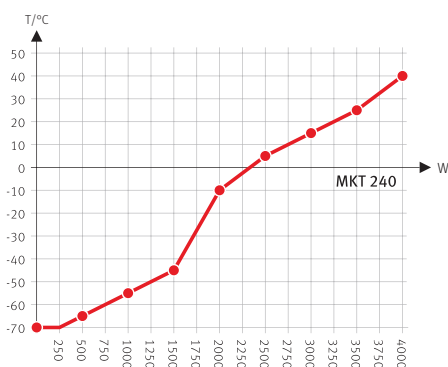


MKT 720

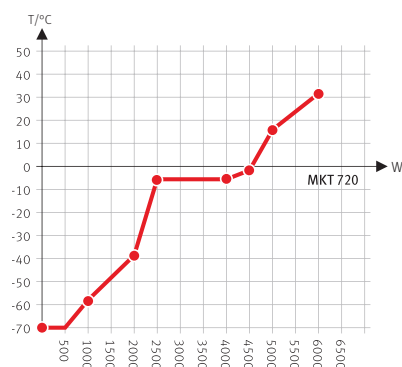


Heat compensation with a set value of -70°C

包括加装件和连接件的尺寸 [mm]


MKT 115

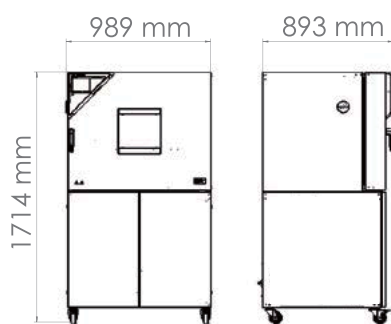

MKT 240

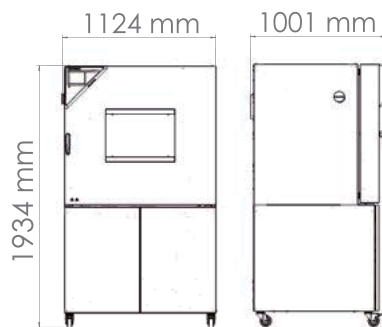

MKT 720

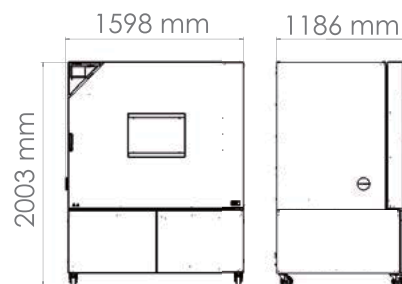

MKFT 系列 | 适用于超低温至高温环境下的湿热交变

BINDER MKFT 系列环境模拟箱是应用于 - 70 °C ~ 180 ° 之间动态气候变化的专业型设备。出色的储存性能和快速冷却令 MKFT 系列成为应对符合标准的复杂气候测试的高端产品。



优势

- APT.line™ 预热腔可实现均匀的气候条件
- 自动进水及废水管理
- 快速响应的压力加温
- 综合编程和数据采集
- 大型可加热式观察窗

性能特点

- 温度范围：- 70 °C ~ 180 °C
- 湿度范围：RH 10 % ~ RH 98 %
- 集成式储水箱 20L
- 4个零电压开关触点
- APT.line™ 预热腔技术
- 对样品的可编程冷凝保护
- 采用时段编程和实时编程的直观触摸屏控制器
- 通过USB可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
- 带 LED 内部照明的可加热式观察窗
- 采用电容式湿度传感器和蒸汽加湿进行湿度调节

尺寸

型号	内部容积 [L]
MKFT 115	115
MKFT 240	228
MKFT 720	734

选配件和配件摘录

带硅胶塞的检测孔	用于放入外部测量装置。选择多样，可选择不同的直径和位置(左侧、右侧或上部)。	
BINDER PURE AQUA 服务	用于水净化或进行脱盐处理，由外壳、测量装置及所有必要连接件组成。	
Dry-air purge	适用于模拟干燥的低温气候。针对可调湿度的 MKF 和 MKFT 系列，扩展了其温湿度范围，并可模拟通用汽车标准，例如 PV 2005；PV 1200；PR 308.2。	
服务	在保养服务协议范畴内，可以享受安装、维护、校准、验证或质保服务，或者可以针对各个单项享受相应服务。更多信息请查阅配件和服务章节。	
BINDER INDIVIDUAL	基于 BINDER 系列产品，我们可研发和实现个性化解决方案，作为单独设备生产或进行小批量供货。所有产品均经过检测和认证，供货时可保证完整的功能和质保。更多信息请查阅配件和服务章节。	

技术参数

型号	MKFT 115	MKFT 240	MKFT 720
尺寸			
内部容积 [L]	115	228	734
设备净重 (空载) [kg]	494	579	887
最大总负载 [kg]	60	70	160
每块搁板的最大负载 [kg]	30	30	40
壁距 后部 [mm]	300	300	300
壁距 侧面 [mm]	200	200	200
尺寸 - 内部尺寸			
宽度 [mm]	600	735	1200
高度 [mm]	480	700	1020
深度 [mm]	400	443	600
尺寸 - 外部尺寸			
宽度 [mm]	980	1115	1580
高度 [mm]	1725	1940	2005
深度 [mm]	865	925	1140
温度性能数据			
温度范围 [°C]	-70...180	-70...180	-70...180
温度偏差 取决于设定值 [± K]	0.1...1.3	0.2...1.8	0.3...2.0
温度波动度 取决于设定值 [± K]	0.1...0.5	0.1...0.5	0.1...0.5
平均加热速度 依据 IEC 60068-3-5 [K/min]	5.5	5	4.8
平均冷却速度 依据 IEC 60068-3-5 [K/min]	4.2	4.2	4
气候性能数据			
温度范围 [°C]	10...95	10...95	10...95
温度波动度 取决于设定值 [± K, 带湿度情况下]	0.1...1	0.1...1.5	0.1...1
湿度范围	10...98	10...98	10...98
湿度波动度 取决于设定值 [± 相对湿度]	≤2.5	≤2.5	≤2.5
电气数据			
额定功率 (400 V) [kW]	5	6	11
固件			
搁板数量 (标准/最多)	1/4	1/6	1/11

所有技术数据均是在室温22°C±3°C、电源电压波动度±10%、配备标准装置的空载设备内测得。温度数据根据DIN 12880，参考BINDER工厂标准进行测试获得。测量遵循了内腔高度、宽度和深度处各留10%间隔的建议，并在测试期间保持100%的风扇转速。所有数据指标均为平均值，作为批量生产机器的典型数据。我们保留随时更改技术规格的权利。

订购信息 [订货编号]


额定电压	选购型号	MKFT 115	MKFT 240	MKFT 720
400 V 3 ~ 50 Hz	标准	9020-0382	9020-0383	9020-0384

所达标准摘要

- DIN EN 60068-2-30:2006-06
- DIN EN 60068-2-38:2010-06
- DIN EN 60068-2-1:2008-01
- MIL STD 331:2005-01
- DIN EN 60068-3-6:2002-12

温湿度图表


MKFT 115, MKFT 240, MKFT 720

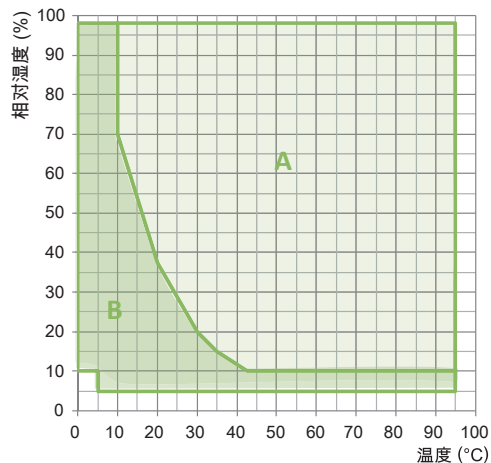

A : 标准气候区域

B : 使用Dry-air purge 后的扩展区域

MKFT 115, MKFT 240, MKFT 720

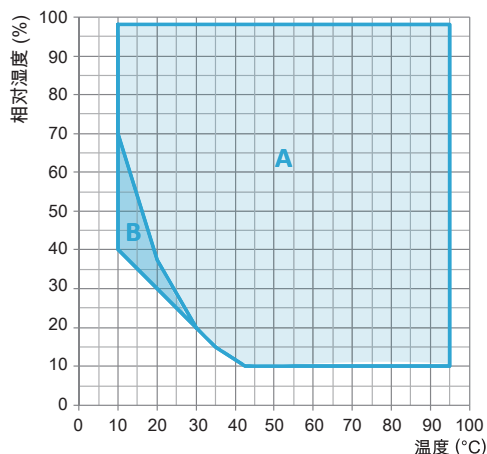


A : 标准气候区域


B : 受到时间限制的运行区域 (最长24小时)

热补偿


MKFT 115

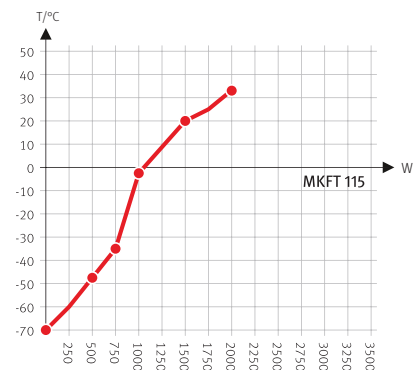

MKFT 240

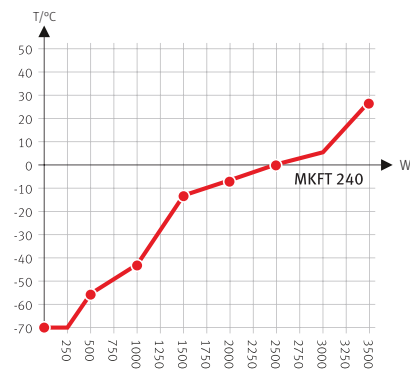

MKFT 720

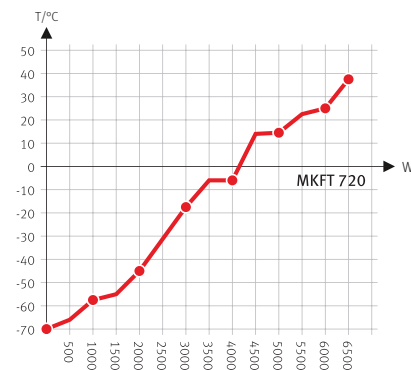


Heat compensation with a set value of -40°C

包括加装件和连接件的尺寸 [mm]


MKFT 115



MKFT 240

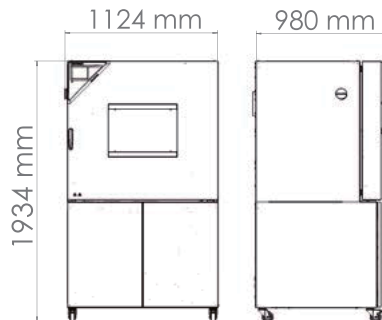

MKFT 720

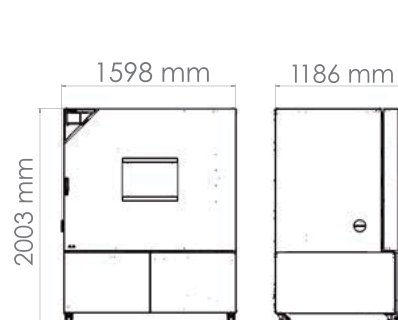

BINDER 产品系列

- 二氧化碳培养箱
- 培养箱
- 低温培养箱
- 植物培养箱
- 超低温冰箱
- 干燥箱和烘箱
- 安全型干燥箱
- 真空干燥箱
- 恒温恒湿箱
- 环境模拟箱
- 电池测试箱
- 步入式恒温恒湿箱



宾德环境试验设备（上海）有限公司
BINDER Environmental Testing Equipment (Shanghai) Co.,Ltd.
上海市闵行区申长路990弄虹桥汇T6幢708室
Room 708, T6, The Gate, 990 Shenchang Road, Shanghai, P.R.China, 201107
Tel +86 21 6858 0825 Fax +86 21 6858 0829 china@binder-world.com
www.binder-world.com