

型号 MK 56 | 高低温交变气候箱 用于温度快速变化

MK 系列 BINDER 箱体适用于 -40 °C 到 180 °C 之间的所有热测试和冷测试。对循环温度测试而言，MK 是替代昂贵的个性化解决方案的睿智之选。

优势

- 利用 APT.line™ 预热腔实现均匀的气候条件
- 广泛的编程和数据采集
- 大型可加热式观察窗



模型 56



模型 56

重要特征

- 温度范围：-40 °C 至 180 °C
- APT.line™ 预热腔技术
- 对样品的可编程冷凝保护
- 带内部照明的观察窗
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic (基础) 版本
- 采用光学和声音报警的故障诊断系统
- 采用间隔编程和实时编程的直观触摸屏控制器
- 通过USB可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
- 设备自检用于全面的状态分析
- 带硅胶塞的接入孔 50 mm，左
- 独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880)，采用光学报警
- 4 个脚轮，两个带制动器
- 计算机接口：以太网
- 可调节的斜坡函数功能
- 集成式连续自动记录仪
- 实时时钟
- 由不锈钢制成的 1 个插架
- 由不锈钢制成的内腔室
- 无氟制冷剂 R-452A
- 通过压缩冷却机进行冷却

OPTIONAL EQUIPMENT

- 多功能管理软件APT-COM —— 管理、采集和记录设备参数
- 搁架——根据具体测试要求，可选择不锈钢搁架
- 气源系统
- 服务 —— 完善的服务，可确保设备正常运行

订购信息

内部容积 [L]	额定电压	插头*	版本	选购型号	物品编码
型号 MK 56					
60	230 V 1~ 50 Hz -16,0 A	CEE 7/7	标准	MK056-230V	9020-0374
	240 V 1~ 60 Hz -16,0 A	NEMA 6-20	标准	MK056-240V	9020-0388

技术参数

一般数据		
目录名称	MK056-230V	MK056-240V
产品编码	9020-0374	9020-0388
选购型号	标准	标准
温度性能数据		
温度范围	-40...180 °C	-40...180 °C
温度均匀性取决于设定值	0,5...1,5 ± K	0,5...1,5 ± K
温度波动度取决于设定值	0,1...0,5 ± K	0,1...0,5 ± K
依据 IEC 60068-3-5 的平均升温速率	5,0 K/min	5,0 K/min
从 180 °C 降至 -40 °C 的冷却时间	90 min	90 min
依据 IEC 60068-3-5 的平均冷却时间	5,0 K/min	5,0 K/min
电气数据		
额定电压	230 V	240 V
电源频率	50 Hz	60 Hz
额定功率	2,8 kW	2,8 kW
设备保险装置	16,0 A	16,0 A
相位 (额定电压)	1~	1~
测量		
内部容积	60 L	60 L
设备净重 (空载)	165 kg	165 kg
每个隔板的最大负载	15 kg	15 kg
最大总负载	60 kg	60 kg
壁距 后部	300 mm	300 mm
壁距 侧面	200 mm	200 mm
不包括加装件和连接件的外壳尺寸		
净宽度	720 mm	720 mm
净高度	1.445 mm	1.445 mm
净深度	778 mm	778 mm
内部尺寸		
内部宽度	400 mm	400 mm

内部高度	420 mm	420 mm
内部深度	350 mm	350 mm
观察窗宽度	288 mm	288 mm
观察窗高度	255 mm	255 mm
外门	1	1

环境相关数据


声压等级	59 dB(A)	59 dB(A)
------	----------	----------

固件


隔板数量 (小时/最大)	1/4	1/4
----------------	-----	-----

所有技术数据仅适用于 22 ±3 °C 环境温度和 ±10 % 电源电压波动下标准规格的无装载设备。按照 BINDER 工厂标准和根据 DIN 12880:2007 确定温度数据，并适应于推荐的为内腔室高度、宽度和深度 10 % 的壁间隙。对系列设备而言所有数据均为典型平均值。技术数据假设的是 100 % 风扇转速。保留技术更改的权利。


尺寸 包括加装件和连接件 [mm]

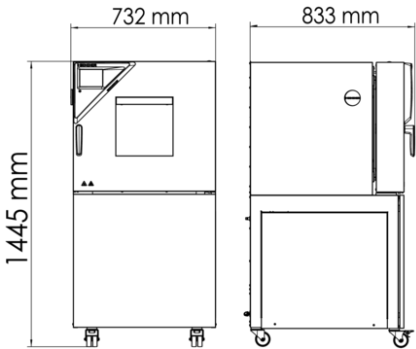


图表

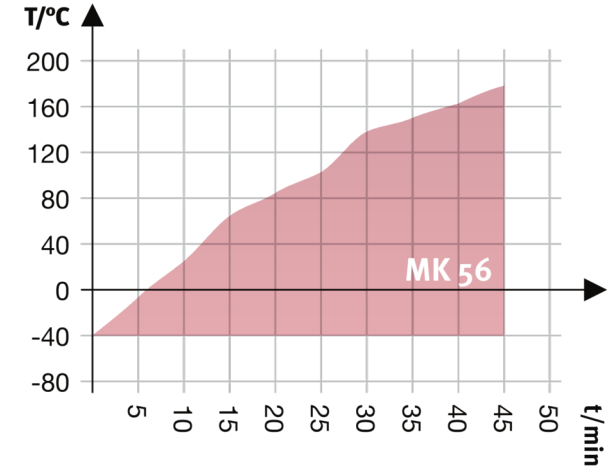

加热曲线图

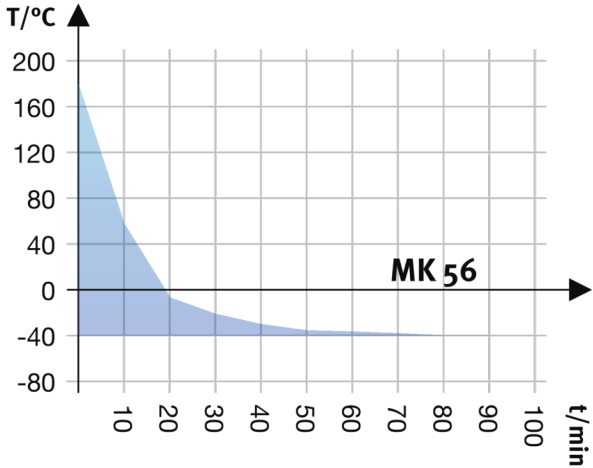

冷却曲线图

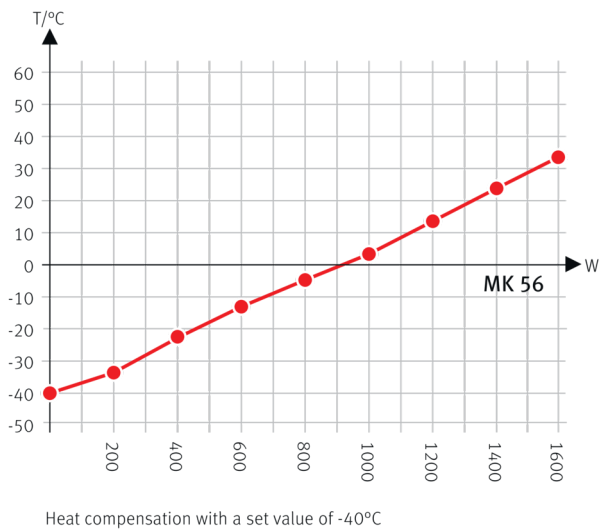

热补偿图表

选购件

名称	描述	MK 56	*	物品编码
PT 100 温度传感器	内腔室内附加的灵活型 Pt 100，用于显示设备显示屏上的温度	•	-	8012-1093
压缩空气干燥器	不可调，含连接件，用于避免冷凝	•	-	8012-1806
压缩空气连接接口	用于连接至属于公司的压缩空气网络	•	-	8012-1795
带硅胶塞的接入孔	上			
	80 mm	•	01	8012-1536
	右			
	30 mm	•	01	8012-1319
	50 mm	•	01	8012-1325
	80 mm	•	01	8012-1331
	左			
	30 mm	•	01	8012-1322
	50 mm	•	01	8012-1328
	80 mm	•	01	8012-1334
接口 RS485，2 线	额外的可用于并联以太网的串口，用于Multi Management Software APT-COM™	•	-	8012-1768
校准证书扩展	针对温度，用于在有效空间中心针对其他检测温度增加测量	•	-	8012-1124
模拟输出 4-20 mA	针对温度值（输出不可调）	•	-	8012-1084

名称	描述	MK 56	*	物品编码
温度校准证书	用于减少至周围空气的散热	•	-	8012-1815
	含证书的空间温度测量，在指定的检测温度下的 9 个测量点	•	-	8012-1560
	含证书的空间温度测量，在指定的检测温度下的 15-18 个测量点	•	-	8012-1581
	含证书的空间温度测量，在指定的检测温度下的 27 个测量点	•	-	8012-1602
	针对温度，在指定的检测温度下在有效空间中心的测量	•	-	8012-1143
门锁	可锁闭的门把手	•	-	8012-1782
限温器 2 级	采用光学报警 (DIN 12880)	•	-	8012-1792
零电压开关触点	用于通过程序控制器控制 3 个开关触点，通过 6 针 DIN 插座可获取 (最大 24 V - 2.5 A)	•	-	8012-1095

配件

名称	描述	MK 56	*	物品编码
APT-COM™ 4 GLP-Edition	适合在符合 GLP 的条件下工作。按照 FDA 准则 21CFR11 记录测量值，有效防止数据篡改。			
	版本 4，GLP 版本	•	-	9053-0042
APT-COM™ 4 PROFESSIONAL-Edition	舒适的设备和用户管理，构建于基础版本。适合联网最多 100 台设备。			
	版本 4，PROFESSIONAL (标准) 版本	•	-	9053-0040
WLAN 套件	该套件包含一个客户端桥接器。BINDER 设备可通过以太网接口与 APT-COM4、LIMS 或客户专用软件进行无线连接。这是当设备安放地点无现场以太网时的一种替代解决方案。此套件必须由客户 IT 部门在安全的网络中进行安装和配置。	•	-	8012-2262
中性清洗剂	浓缩，用于温和地去除污物残留；填充量 1 kg	•	-	8012-2250
强化插架	不锈钢，带格栅保护装置 (1 套 4 件)	•	-	8012-1091
接口转换器 RS 485 / RS 422	电缆束 RS 422 和接口转换器 RS 485 / RS 422，用于连接至 10 路插接分配器			
	规格 115 V	•	-	8012-0599
	规格 230 V	•	-	8012-0589
插架	每个隔板的最大负载为 30 kg			
	不锈钢	•	-	8012-2085
插架配件	用于额外固定插架的格栅保护装置 (1 套 4 件)	•	-	8012-2280
板材	每个隔板的最大负载为 30 kg			
	不锈钢	•	-	8012-2175

名称	描述	MK 56	*	物品编码
认证资料	IQ/OQ/PQ 文件 - 针对由客户进行的验证的辅助资料，根据客户要求，为认证文件夹 IQ/OQ 扩展章节 PQ；参数：根据不同的设备，含有温度、CO ₂ 、O ₂ 或压力等参数。			
	打印版保存在文件夹中	•	-	7007-0005
	数字版采用 PDF 格式	•	-	7057-0005
	IQ/OQ 文件 - 针对由客户进行的验证的辅助资料，由下列内容组成：IQ/OQ 检查表，包括校准说明书和完整的设备文档；参数：根据不同的设备，含有温度、CO ₂ 、O ₂ 、压力等参数。			
	打印版保存在文件夹中	•	-	7007-0001
	数字版采用 PDF 格式	•	-	7057-0001

服务

名称	描述		*	物品编码
保养服务				
密封性检测	含碳氟化合物系统的密封性检测和记录，根据指令 EG842/2006，包括检测记录		-	DL00-0034
维护	根据维护计划提供一次性维护服务。机械和电气部件的目视检查所有主要功能的测试。在有效空间中心校准用户指定的一个测试温度，不包含证书		-	DL20-0500
安装服务				
设备说明	设备功能原理和基本功能指导说明，控制电子系统的操作，包括编程		05	DL10-0700
设备调试	将设备连接到客户方的接口上（电、水、废水、气体），检查基本功能，针对操作提供简短指导。 (不包括：开箱、设置、控制器说明、编程、安装)		-	DL10-0300
校准服务				
温度校准证书	准 一(1)个 由用户指定的在有效空间中心检测温度，包括证书		-	DL30-0101
	扩展校准一 (1) 个额外的、由用户指定的位于有效空间中心的检测温度，包括证书		-	DL30-0102
空间温度测量，9 个测量点	9 个测量点的空间温度测量，由用户指定设定值，包括证书		-	DL30-0109
空间温度测量，18 个测量点	18 个测量点的空间温度测量，由用户指定设定值，包括证书		-	DL30-0118
空间温度测量，27 个测量点	27 个测量点的空间温度测量，由用户指定设定值，包括证书		-	DL30-0127
维护服务协议				
金牌3年维护服务协议	根据协议提供维护服务，机械和电气部件的目视检查，控制响应的检查，备件享有 20% 的折扣，所有主要功能的检查，易损件更换，一个温度和 CO ₂ 浓度值的校准，包含证书		-	DL20-0940
铜牌3年维护服务协议	根据协议提供维护服务，机械和电气部件的目视检查，控制响应的检查，备件享有 20% 的折扣		-	DL20-0710
银牌3年维护服务协议	根据协议提供维护服务，机械和电气部件的目视检查，控制响应的检查，备件享有 20% 的折扣，所有主要功能的检查，在有效空间中心校准用户指定的一个测试温度，不包含证书		-	DL20-0830

名称	描述	*	物品编码
质保服务			
保修期延长 1 年	保修期自交货之日起延长 1 年，易损件除外	-	DL50-0040
验证服务			
IQ/OQ/PQ 执行	根据验证文件夹执行 IQ/OQ/PQ	-	DL44-0500
IQ/OQ 执行	根据验证文件夹执行 IQ/OQ	-	DL41-0200

提示

- 01 在接入孔区域可能会出现冷凝。
在接入孔的特殊位置预计会出现起泡。
- 05 规定的价格包括旅费。您所在使用区域的旅费请参阅 BINDER 服务章节。
对于在瑞士的使用，所有规定的服务价格均包括国家特定的额外收费（敬请垂询）。

BINDER GmbH
德国图特林根
电话 +49 7462 2005 0
传真 +49 7462 2005 100
info@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Inc.
Bohemia, NY, USA
电话 +1 631 224 4340
传真 +1 631 224 4354
usa@binder-world.com
www.binder-world.us

**BINDER Environmental Testing
Equipment (Shanghai) Co., Ltd. (宾德环
境试验设备 (上海) 有限公司)**
中国上海
电话 +86 21 685 808 25
传真 +86 21 685 808 29
china@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Asia Pacific (Hong Kong) Ltd.
(宾德亚太 (香港) 有限公司)
中国香港九龙区
电话 +852 39070500
传真 +852 39070507
asia@binder-world.com
www.binder-world.com